

Over het product

Materiaal:	100% natuurlijk rubber (NRL)
Kleur:	Wit
Model:	Rolrand, ambidextrous
Poeder:	Neutrale maïszetmeel (USPXX1)
Proteïne inhoud:	<50 µg/g (EN455-3)
Restpoeder inhoud:	<2.0mg/dm ²
AQL:	1.5
Goederencode:	40151100
Land van herkomst:	Maleisië / Thailand
Buitenverpakking:	Kartonnen omdoos
Binnenverpakking:	Kartonnen dispenser

Code	Kleur	Maat	Omdoos	Pallet
3300	Wit	XS	10x100	54 dozen
4400	Wit	S	10x100	54 dozen
5500	Wit	M	10x100	54 dozen
6600	Wit	L	10x100	54 dozen
7700	Wit	XL	10x100	54 dozen

Fysische eigenschappen


Omschrijving	Maat	Standaard
Lengte (mm)	Alle maten	Min. 240mm
Breedte (mm)	XS	<80 +/- 10
	S	80 +/- 10
	M	95 +/- 10
	L	110 +/- 10
	XL	>110 +/- 10
Dikte (mm) (* Enkele laag)	Alle maten	Vinger: 0.08
		Palm: 0.08
Kracht tot breuk	Voor veroudering	Na veroudering
	6.0N	6.0N

EAN-codes

Artikelnummer	Dispenser	Omdoos
3300	8716244007379	8716244007386
4400	8716244007393	8716244007409
5500	8716244007416	8716244007423
6600	8716244007430	8716244007447
7700	8716244007454	8716244007461



Opslag voorschriften en houdbaarheid

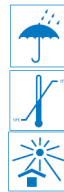

De CMT Latex handschoenen hebben een houdbaarheid van 5 jaar vanaf productiedatum wanneer volgende opslagvoorschriften worden nageleefd:

De handschoenen dienen droog, koel en buiten direct zonlicht bewaard te worden.

Toepassing

CMT latex handschoenen zorgen voor een uitstekend tastgevoel en bieden bescherming volgens categorie 3 van de EN420 norm.

Accessoires

3372	CMT wanddispenser	Roestvrijstaal
3373	CMT wanddispenser	Acryl

Geïmporteerd en gedistribueerd door

Cemex Trescon B.V.
Spectrumlaan 5
2665NM Bleiswijk
Nederland
(T) +31 (0)79 346 60 00
(F) +31 (0)79 346 60 22
info@cemextrescon.nl
www.cemextrescon.nl



Cemex Trescon B.V. is
BRC S&D gecertificeerd sinds
2007.

Wetgeving, normeringen en symbolen

De CMT latex handschoenen voldoen aan de volgende wetgeving(en) en normering(en):



Conformité Européenne: 0321 Category III



Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees parlement en raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

- 93/42/EEC van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen.
- EN455-1, medische handschoenen voor eenmalig gebruik, eisen en beproevingsmethoden voor de afwezigheid van gaten.
- EN455-2, medische handschoenen voor eenmalig gebruik, eisen en beproeving voor fysische eigenschappen.
- EN455-3, medische handschoenen voor eenmalig gebruik, eisen en beproevingsmethoden voor de biologische evaluatie.
- EN374-1, beschermende handschoen tegen chemicaliën en micro-organismen, prestatie-eisen.
- EN374-2, beschermende handschoen tegen chemicaliën en micro-organismen, bepaling van weerstand tegen indringen.
- EN374-3, beschermende handschoen tegen chemicaliën en micro-organismen; bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën.
- EN420, beschermende handschoenen, algemene eisen. Afwijking; alle maten hebben de zelfde lengte van circa 240mm.
- EN388, Handschoenen die beschermen tegen mechanische risico's.



Dit product is voor eenmalig gebruik.



De dispensers en omdoos zijn gemaakt van recyclebaar karton.

Voor dit product is een productspecificatie aanwezig.

Goed om te weten

- Latex kan bij sommige personen een allergische reactie veroorzaken.
- Raadpleeg uw leverancier ten alle tijden wanneer u er niet zeker van bent of de CMT Latex handschoenen geschikt zijn voor de toepassing waarvoor u deze wilt gebruiken.
- De CMT Latex handschoenen zijn geteld op basis van een gemiddeld gewicht per dispenser.

Gebruiksaanwijzing

1. Trek de handschoen, met de andere gehandschoende hand, bij de vingertoppen los.
2. Vouw de handschoen op tot een bal.
3. Pak het handboord van de eerst uitgetrokken handschoen vast.
4. Trek de tweede handschoen, binnenstebuiten over de eerste handschoen heen, uit en gooi de handschoenen weg.

Vermijd bij het uittrekken van de handschoenen zoveel mogelijk contact met de buitenzijde om (kruis)besmetting te voorkomen.

